

JUDUL :**PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK DOCTOR CAP****1. Tujuan.**

Prosedur ini bertujuan untuk memantau dan mengukur karakteristik produk sehingga persyaratan produk terpenuhi

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup semua produk PT. Beauty Kasatama Indonesia mulai dari proses produksi sampai dengan pengepakan (Packing)

3. Definisi**4. Uraian Umum**

- 4.1. QC *in process* dan operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan baku Doctor Cap, setiap awal proses dengan mencocokkan label bahan dengan formulir spesifikasi produk dan daftar bahan halal. Dokumentasikan pada formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi.
- 4.2. QC *in process* melakukan pemeriksaan kesesuaian pengkodean nomor batch, tanggal produksi dan *expired date* sebelum proses pemberian *code* pada mesin *coding*.
- 4.3. QC *in process* melakukan pemeriksaan produk doctor cap dengan frekuensi setiap 1 jam dengan parameter pemeriksaan :
 - 4.3.1. Dimensi (Panjang dan lebar Doctor Cap) sebanyak 3 pcs.
 - 4.3.2. Kebersihan produk 10 pcs
 - 4.3.3. Kerapian lipatan/tepi underpad 10 pcs
 - 4.3.4. Kerapian press pola 10 pcs.
 - 4.3.5. Pemeriksaan adanya pecahan kaca/lampu
- 4.4. Petugas QC final check melakukan pemeriksaan hasil pengemasan karton sebanyak 20 % dengan melakukan pemeriksaan hasil pengemasan dengan melakukan pemeriksaan pada parameter :
 - 4.4.1. Sealing plastik kemasan
 - 4.4.2. Kesesuaian Jumlah dalam 1 karton
 - 4.4.3. Kesesuaian Nomor Batch
 - 4.4.4. Kesesuaian Coding
 - 4.4.5. Kesesuaian Nomer Izin Edar
 - 4.4.6. Kesesuaian stiker label

JUDUL :

PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK DOCTOR CAP

- 4.5. Bila ditemukan produk tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan maka karton tersebut dilakukan karantina diberi “label karantina” berwarna kuning dan dilakukan sortir ulang.
- 4.6. Produk yang tidak ditemukan masalah saat pemeriksaan dan dinyatakan lolos diberi stiker “penandaan produk” dan diberikan stempel QC pass dan paraf pemeriksa sebagai produk yang siap diserahkan terimakan ke Gudang. Lakukan dokumentasi pada formulir pemeriksaan kualitas hasil packaging.

5. Dokumen Terkait.

- 5.1. Manual Mutu (BKI.MM.MR.01)
- 5.2. Prosedur Penandaan kode produk (BKI.PM.QC.02)
- 5.3. Prosedur penanganan ketidaksesuaian proses (BKI.PM.QC.07)
- 5.4. Prosedur Pelabelan (BKI.PM.QC.12)

6. Catatan Mutu.

- 6.1. Formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi (BKI.FM.QC.08)
- 6.2. Checklist line clearance (BKI.FM.QC.21)
- 6.3. Laporan kualitas hasil produksi mesin doctor cap (BKI.FM.QC.40)
- 6.4. Laporan Kualitas Hasil Packaging produk doctor cap (BKI.FM.QC.41)

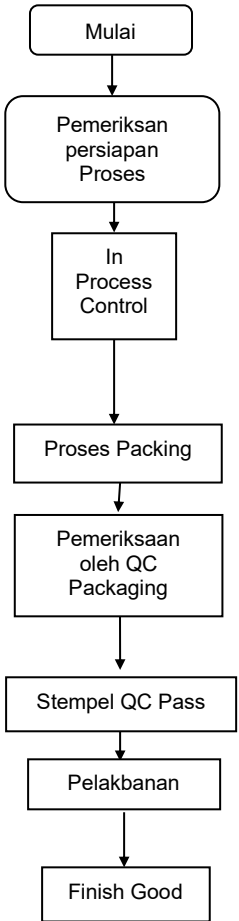
PROSEDUR MUTU

No.Dokumen : BKI.PM.QC.14
No. Revisi. : 00
Tanggal : 07 September 2023
Halaman : 4/4

JUDUL :

PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK DOCTOR CAP

5. Isi Prosedur.

PROSEDUR	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	REFERENSI
	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa hasil proses Mesin sesuai speck dan daftar bahan halal QC dan Operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan setiap awal shift 	<ul style="list-style-type: none"> QC In Process 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Form Pengecekan Bahan Baku QC-Produksi
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesesuaian nomor batch dan expired date sebelum proses coding mesin QC in Process sampling tiap 1 jam selama proses berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Operator QC In Process 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pemeriksaan kualitas Hasil Produksi Mesin doctor cap
	<ul style="list-style-type: none"> Operator Packing melakukan pengecekan produk dan melakukan pengemasan QC Final Check memastikan hasil packing sesuai standart dengan sampling tiap karton 	<ul style="list-style-type: none"> Packing QC Final Check 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging
	<ul style="list-style-type: none"> QC Final Check memberikan stempel QC Pass untuk produk yang telah diperiksa 	<ul style="list-style-type: none"> QC Final Check 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging
	<ul style="list-style-type: none"> Pelakbanan karton yang telah diberi QC Pass 	<ul style="list-style-type: none"> Operator lakban 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging